

## 直立式ネブライザ(手持式)

**【警告】**  
医師又は医療従事者の指示、指導のもとに使用してください。

**【禁忌・禁止】**  
人工呼吸装置に本器を接続しないでください。

### 【形状・構造及び原理等】

・材質:ポリ塩化ビニール

本品はポリ塩化ビニール(可塑剤:フタル酸ジ  
(2-エチルヘキシル))を使用している。

・本品は未滅菌商品です。

■型番 Ym-008手持ち式ネブライザージャー

■マウスピース、Tコネクタと

■T型マウスピースとリザーバー管使用



■各部の形状と名称

<本体>手持ち式ネブライザージャー

代表写真



・薬液容量30cc  
・手持ち使用  
・煮沸消毒不可

本体:PS  
キャップ:AS

<付属品>吸入マスク 色:透明(調節用ノーズクリップ、コネクタ、ストラップを含む)



大穴



小穴

サイズ:XL,L,M,S の選択可

<付属品>送気ホース




標準長:2M、10cm間隔で要求可。  
色:透明  
◎コネクタの形状:両端とも標準

<付属品>T型マウスピース

<付属品>リザーバー管



22Mx17F

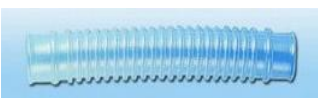

22Fで長さ:16cm

<付属品>マウスピース

<付属品>Tコネクタ



18M/22M



22M/15F 17F  
22M/18F

構成:ネブライザキットに上記の付属部品を組み合わせて  
全体構成図その1、その2、その3、を実現する。  
なお本体及び各付属品は単体でも販売いたします。

原理:外部からの圧縮空気を送気ホースを経てネブライザキットに  
供給すると、あらかじめネブライザキット内に用意された処方薬液が  
ベンチュリー効果によって吸い上げられ霧状に噴霧されます。  
吸入マスクやマウスピースにより患者に吸入されます。

### 【使用目的、又は効果】

患者に吸入させるため、エアロゾル化した水又は医薬品を供給する装置をいう。  
エアロゾルを発生させる酸素又は空気源、医薬品のリザーバ、パッフル、  
コンプレッサを内蔵する。(当目録の定義から)

・噴霧量:供給流量5L/min時 噴霧量が約0.4g/min以上

### 【使用方法等】

1. 送気ホースの片端をコンプレッサに接続します。
2. 送気ホースのもう片端を直立式ネブライザキットに接続します。
3. 処方された薬液をネブライザキットの下部に注ぎます。
4. ネブライザキットの上部を時計回りに閉めます。
5. 吸入のために全体構成図その1、その2、その3のように吸入マスクやマウスピース他を取り付けます。

1. 治療のためにリラックスして座ります。  
(できるだけネブライザを傾けない。45度傾斜可能)
2. コンプレッサを作動させます。(流量調節4~8 lpm)
3. 霧が吸入マスクやマウスピースから見えてくるのを確認します。
4. 吸入マスクで口と鼻を覆い口でゆっくり息を吸ったり吐いたりします。  
マウスピースでは歯の間にくわえて唇を閉じゆっくり息を吸ったり吐いたりします。
5. 霧が断続的になり、霧がほとんど出なくなると治療は終了です。  
必要によりネブライザキットを指で軽くトン、トンとしても霧がでます。  
通常は少量の薬液が残ります。

<使用後>

1. 毎使用後に、送気ホースをはずした後ネブライザキットの上部を回して  
水を注ぎ入れ再度送気ホースを接続し残った薬液を洗うためにもう一度  
圧縮空気を数秒間送ります。
2. その後、分解してすべての部品(送気ホースを除く)を中性洗剤を溶かした温水  
で洗い、清水ですすぎます。水を振り落として、空気乾燥させ、  
組み立てなおして清潔に保管します。

<使用方法に関する注意>

- ・使用後毎回洗浄しますが、病人が変わる場合は適切な消毒で交叉感染を防いでください。またはすべての部品を新品に交換する事を推奨します。
- ・ネブライザキットは煮沸消毒できます。
- ・すべての部品は使用開始から3ヶ月を最長期間として新品に交換してください。
- ・不要となった本体、付属品の廃棄においてはお住まいの市区町村の指示に従う。

### 【保管方法及び有効期間等】

<貯蔵・保管方法>

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて室温で保管すること。

【包装】1セット/1袋

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:京中貿易株式会社

京都市中京区神泉苑通御池上る神泉苑町1番地2 Tel:075-811-0545

製造業者:Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co., Ltd. 中国

杭州京冷医疗器械有限公司